


## Supports de moniteur A-dec



Les supports de moniteur A-dec utilisent l'un des mécanismes de positionnement suivants :


### Flottant

Ces supports fournissent une tension continue qui maintient le moniteur en place lorsqu'il a été positionné.

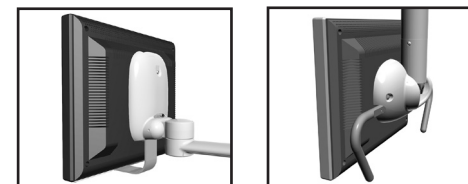

### Verrouillé

Ces supports incluent une manette qui permet de verrouiller manuellement l'inclinaison du moniteur.

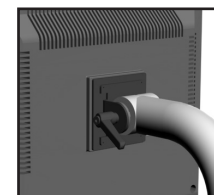

Les supports de moniteur A-dec sont conformes à la norme VESA (Video Electronics Standards Association) et sont donc compatibles avec la plupart des marques et des tailles d'écran.




**REMARQUE** Les supports de moniteur A-dec sont destinés à supporter et à positionner un écran plat à usage médical ou équivalent. Les caractéristiques de l'écran à respecter figurent dans le tableau de la page 3.


## Réglages et caractéristiques techniques du support de moniteur

Pour connaître les réglages et les caractéristiques techniques du moniteur en fonction du type de support, se reporter aux images ci-dessous et au tableau de la page 3.


### Type 1, flottant

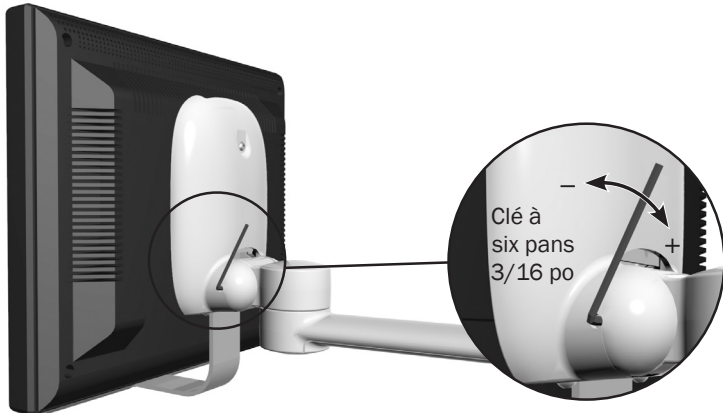


### Type 2, flottant

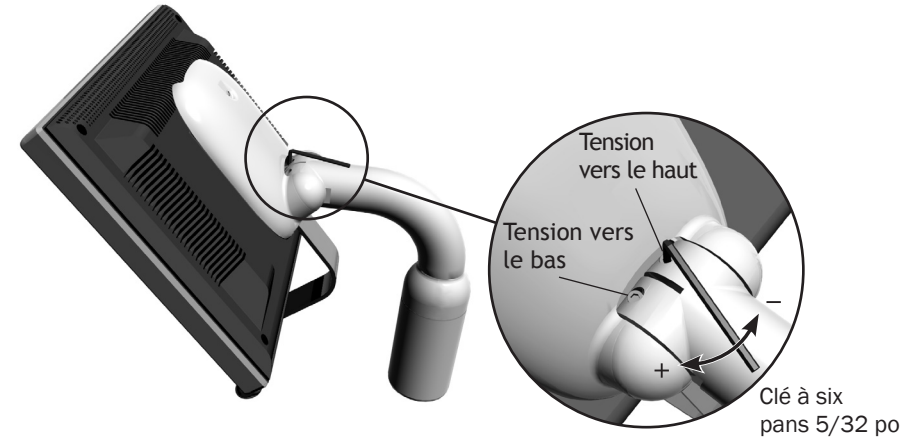

### Type 3, flottant

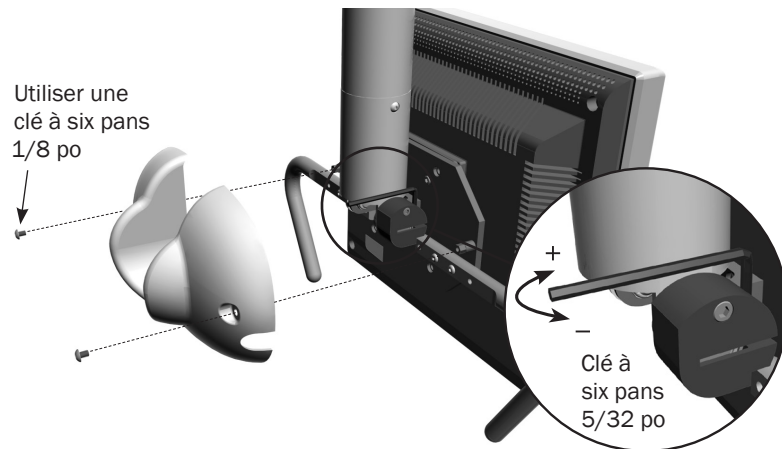

### Type 4, verrouillé

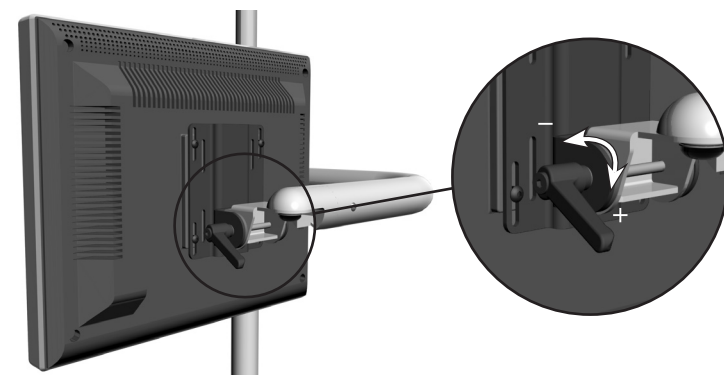

Réglage de la tension verticale	Taille de la clé à six pans	Type de réglage	Disponible sur	Poids maximal du moniteur	Taille maximale du moniteur
<b>Type 1, flottant</b> Tourner la clé à six pans dans le sens horaire pour augmenter la tension, ou dans le sens anti-horaire pour la réduire.	3/16 po	Flottant/tension unique	fauteuil, support central	9 kg (20 livres)	483 mm en diagonale (19 pouces)
<b>Type 2, flottant</b> Tourner la clé à six pans dans le sens horaire pour augmenter la tension, ou dans le sens anti-horaire pour la réduire. Ce réglage peut être nécessaire avec la tension vers le haut et la tension vers le bas.	5/32 po	Flottant/tension double	chaise, support central, montage sur rail et armoire	14 kg (31 livres)	483 mm en diagonale (19 pouces)
<b>Type 3, flottant</b> Utiliser une clé à six pans de 1/8 po pour retirer les vis du cache arrière. Utiliser une clé à six pans de 5/32 po pour augmenter ou réduire la tension verticale du montant.  <i>(Remarque : les poignées peuvent être repositionnées une fois le cache retiré. Utiliser une clé à six pans de 1/8 po pour retirer et replacer les vis des poignées.)</i>	1/8 po 5/32 po	Flottant/tension unique	plafond, armoire, mur	14 kg (31 livres)	483 mm en diagonale (19 pouces)
<b>Type 4, verrouillé</b> Tourner la manette dans le sens horaire pour verrouiller la position du moniteur.	S.O.	Verrouillage/manette	fauteuil, support central	14 kg (31 livres)	483 mm en diagonale (19 pouces)

## Caractéristiques et garantie



**IMPORTANT** Pour les caractéristiques électriques, l'identification des symboles et les autres exigences réglementaires, se reporter au document *Informations réglementaires, caractéristiques techniques et garantie* (réf. 86.0221.01), disponible dans la bibliothèque de documents à l'adresse [www.a-dec.com](http://www.a-dec.com).



**REMARQUE** Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Les réglementations peuvent varier selon les pays. Pour plus d'informations, contacter le distributeur A-dec agréé local.

Les informations relatives à la garantie sont fournies dans le document *Informations réglementaires, caractéristiques techniques et garantie* (réf. 86.0221.01), disponible dans la bibliothèque de documents à l'adresse [www.a-dec.com](http://www.a-dec.com).



### Siège social d'A-dec

2601 Crestview Drive  
Newberg, OR 97132  
États-Unis  
Tél. : +1 800 547 1883 aux États-Unis/Canada  
Tél. : +1 503 538 7478 hors États-Unis/Canada  
Fax : +1 503 538 0276  
[www.a-dec.com](http://www.a-dec.com)

### A-dec Australie

Unit 8  
5-9 Rickety Street  
Mascot, NSW 2020  
Australie  
Tél. : 1 800 225 010 en Australie  
Tél. : +61 (0)2 8332 4000 hors de l'Australie

### A-dec Chine

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.  
528 Shunfeng Road  
Qianjiang Economic Development Zone  
Hangzhou 311106  
Zhejiang, Chine  
Tél. : +1.503.538.7478

## Modèles et versions des produits abordés dans ce document

Modèles	Versions	Description
300, 381, 382, 482, 581, 584, 585, 586, 587, Performer 8000	A	Support d'écran



### A-dec Royaume-Uni

Représentant agréé dans l'Union européenne  
Austin House, 11 Liberty Way  
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ  
Angleterre  
Tél. : 0800 ADECUK (233285) au Royaume-Uni  
Tél. : +44 (0) 24 7635 0901 hors du Royaume-Uni

86.0309.01 Rev E  
Copyright 2016 A-dec Inc.  
Tous droits réservés.